

BINDER – Комплект подачи газа | Арт. №: 8012-0408

Внешний переключатель в комплекте подачи газа для инкубаторов BINDER автоматически переводит подачу газа со второго баллона, как только первый газовый баллон пуст. В этот комплект входит функция звукового и визуального сигнала, а также релейный выход для внешней системы оповещения. Этот набор можно установить только на двух CO₂ инкубаторах, которые используют газовые баллоны с CO₂, O₂ или N₂.



Технические характеристики:

Размеры ДхШхГ (мм/дюйм):

≈ 200 / 7,87 x 120 / 4,72 x 95 / 3,74

Вес системы подачи газа: ≈ 2 кг / 4,4 фунта.

Давление в системе подачи: 0,3 бар / 4,4 ф. на кв.дюйм до 2,0 бар / 29 ф. на кв.дюйм

Допустимое давление: макс. 3,0 бар / 43,5 ф. на кв.дюйм

Рабочее напряжение от сети электропитания 24 В пост.тока

Блок питания для подключения к сети электропитания напряжением: 110 В - 240 В

Степень защиты: IP20


Автоматическое переключение с пустого баллона на полный при падении давления ниже 0,3 бар / 4,4 ф. на кв. дюйм

Комплект поставки

- Блок управления устройства смены баллонов
- Блок питания с переходниками
- Тройник
- 4 шланговых хомута
- Стенной крюк

Схема подключения:

Подключение инкубатора BINDER (CO₂) к двум газовым баллонам

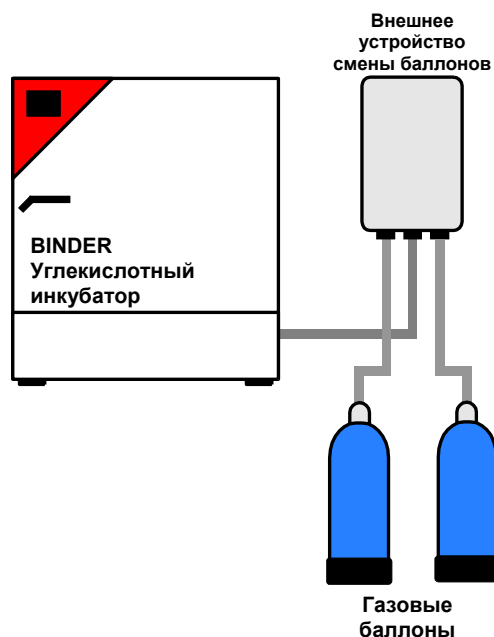

Подключение инкубатора BINDER (CO₂) к двум газовым баллонам

