


Agitadores para incubadoras de CO₂ de BINDER

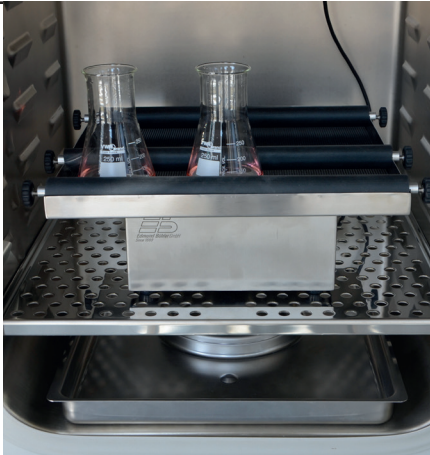

Agitador en la incubadora de CO₂ CB 160 de BINDER

Para modelos de la serie CB 160 y CB 220

El agitador de CO₂ de BINDER es la nueva solución de alta calidad para incubar cultivos celulares en suspensión en incubadoras de CO₂. Gracias al uso exclusivo de componentes resistentes a la corrosión en una carcasa de acero inoxidable, el agitador de CO₂ es especialmente apto para incubadoras de gasificación con elevadas concentraciones de CO₂ y una humedad del aire casi saturada. Con una pérdida calorífica mínima de solo 4 vatios, no se altera el control de la temperatura de la incubadora CB y se mantiene la temperatura óptima en todo el interior. La unidad de control externa con indicador LCD permite un manejo cómodo y sencillo fuera de la incubadora. La versión "Universal" es apta para todas las incubadoras de CO₂ sin puerto de acceso, mientras que la versión "Profesional" es adecuada especialmente para la serie CB, con la opción de conducto para corriente. Las fugas y la condensación quedan totalmente excluidas en esta solución.


DATOS TÉCNICOS

Movimiento del agitador:	horizontal circular
Superficie del agitador (mm):	anch. 375 x prof. 375
Carga máx.:	2 kg
Número de revoluciones:	5 – 220 rpm
Elevación:	20 mm
Tiempo de ejecución:	1 s – 100 h o régimen continuo
Indicador LCD:	número de revoluciones y tiempo de ejecución
Concentración permitida de CO ₂ :	hasta el 20 %
Humedad permitida:	hasta el 95 % sin condensación
Temperatura ambiente:	4 °C – 45 °C
Conexión eléctrica:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Tipo de protección:	IP 21
Pérdida calorífica:	máx. 4 W
Dimensiones exteriores (mm):	anch. 375 x prof. 375 x alt. 145
Fijación de la muestra:	3 bloques terminales
Peso:	9,1 kg

CARACTERÍSTICAS:

- solución permitida, especialmente apta para incubadoras de CO₂ de BINDER
- Elementos resistentes a la corrosión en una carcasa de acero inoxidable
- Pérdida calorífica reducida
- Unidad de control externa con indicador LCD

AGITADOR "UNIVERSAL"	AGITADOR "PROFESIONAL"
Agitador y control conectados por cable plano, uso universal	Agitador y control equipados con enchufes LEMO, exclusivos para BINDER CB con conducto para corriente
N.º art. 8012-1771	N.º art. 8012-1772

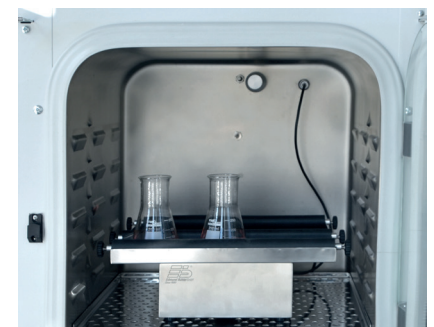

► Todos los extras online go2binder.com/de-Optionen