

# LED-Lichtleisten Sets



## Für Modelle der Serien KB, KT und KBF

Die LED-Lichtleisten Sets sind zur Beleuchtung des Innenraumes von BINDER Klimageräten verschiedener Serien und Größen mit niedrigen Lichtstärken geeignet. Sie sind einfach zu montieren und flexibel positionierbar. Die hochwertigen Weißlicht-LED-Module sind wassergeschützt und in robuste Aluminium-Profileschienen eingegossen.

Die Lichtleisten sind in drei verschiedenen Längen als Basis-Sets mit Befestigungsmaterial und Steuergerät erhältlich. Mit einem Erweiterungs-Set können zwei weitere Lichtleisten an das Steuergerät angeschlossen werden, das mit Dimmer zum Einstellen der Beleuchtungsstärke und einer digitale Zeitschaltuhr zum Steuern der Ein- und Ausschaltzeiten ausgestattet ist.

### LED-LICHTLEISTEN BASIS-SET:

- Basis-Set 300 Art. Nr 8012-1107
- Basis-Set 500 Art. Nr 8012-1108
- Basis-Set 900 Art. Nr 8012-1109

#### Lieferumfang:

- 2 LED-Lichtleisten
- Einbaumaterial:
  - 4 Befestigungsclips aus Federstahl
  - 6 Befestigungsclips aus Kunststoff
  - tesa Powerstrips®
- Steuergerät für bis zu 4 LED-Lichtleisten



Lieferumfang Basis-Set

### LED-LICHTLEISTEN ERWEITERUNGS-SET:

- Erweiterungs-Set 300 Art. Nr 8012-1716
- Erweiterungs-Set 500 Art. Nr 8012-1717
- Erweiterungs-Set 900 Art. Nr 8012-1718

#### Lieferumfang:

- 2 LED-Lichtleisten
- Einbaumaterial:
  - 4 Befestigungsclips aus Federstahl
  - 6 Befestigungsclips aus Kunststoff



Lieferumfang Erweiterungs-Set


## EINBAU-BEISPIELE



50 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstips® an der Kesseldecke



50 cm Lichtleiste, befestigt mit Kunststoffclips am Einschubgitter

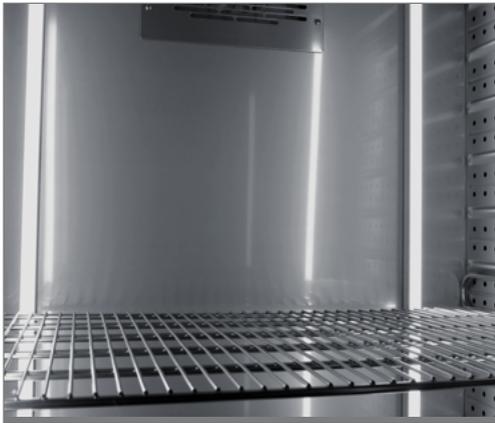

90 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstips® an der Kesselrückwand



30 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstips® an der Kesselseite

## GEEIGNET FÜR FOLGENDE KB, KT UND KBF GRÖSSEN

	Modell 53	Modell 115	Modell 170	Modell 240	Modell 400	Modell 720	Modell 1020
Set 300 (30cm)	•	•	•	•	•	•	•
Set 500 (50cm)	-	•	•	•	•	•	•
Set 900 (90cm)	-	-	-	-	•	•	•

### TECHNISCHE DATEN LICHTLEISTEN

Länge:	30 cm	50 cm	90 cm
Beleuchtungsstärke (Abstand: 12 cm):	540 Lux	670 Lux	690 Lux
Lichtfarbe:	6.500 K (cool daylight)		
Betriebs- Temperaturbereich	-10...60 °C		
Schutzart	IP 65		

### TECHNISCHE DATEN STEUERGERÄT

Netzspannung	100-240 V
Dimmer:	0-100 %
Zeitschaltuhr:	Digital, für Tages- und Wochenprogramm
Befestigung:	Magnetisch am Schrank