

# LED-Lichtleisten Sets



Die LED-Lichtleisten Sets sind zur Beleuchtung des Innenraumes von BINDER Klimageräten verschiedener Serien und Größen mit niedrigen Lichtstärken geeignet. Sie sind einfach zu montieren und flexibel positionierbar. Die hochwertigen Weißlicht-LED-Module sind wassergeschützt und in robuste Aluminium-Profileschienen eingegossen.

Die Lichtleisten sind in drei verschiedenen Längen als Basis-Sets mit Befestigungsmaterial und Steuergerät erhältlich. Mit einem Erweiterungs-Set können zwei weitere Lichtleisten an das Steuergerät angeschlossen werden, das mit Dimmer zum Einstellen der Beleuchtungsstärke und einer digitale Zeitschaltuhr zum Steuern der Ein- und Ausschaltzeiten ausgestattet ist.

## LED-LICHTLEISTEN BASIS-SET:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| • Basis-Set 300 | Art. Nr 8012-1107 |
| • Basis-Set 500 | Art. Nr 8012-1108 |
| • Basis-Set 900 | Art. Nr 8012-1109 |

### Lieferumfang:

- 2 LED-Lichtleisten
- Einbaumaterial:
  - 4 Befestigungsclips aus Federstahl
  - 6 Befestigungsclips aus Kunststoff
  - tesa Powerstrips®
- Steuergerät für bis zu 4 LED-Lichtleisten



Lieferumfang Basis-Set

## LED-LICHTLEISTEN ERWEITERUNGS-SET:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Erweiterungs-Set 300 | Art. Nr 8012-1716 |
| • Erweiterungs-Set 500 | Art. Nr 8012-1717 |
| • Erweiterungs-Set 900 | Art. Nr 8012-1718 |

### Lieferumfang:

- 2 LED-Lichtleisten
- Einbaumaterial:
  - 4 Befestigungsclips aus Federstahl
  - 6 Befestigungsclips aus Kunststoff



Lieferumfang Erweiterungs-Set


## EINBAU-BEISPIELE



50 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstrips® an der Kesseldecke



50 cm Lichtleiste, befestigt mit Kunststoffclips am Einschubgitter

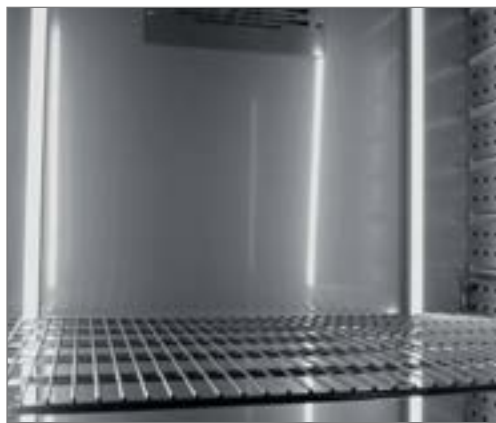

90 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstrips® an der Kesselrückwand



30 cm Lichtleiste, befestigt mit tesa Powerstrips® an der Kesselseite

## GEEIGNET FÜR FOLGENDE MODELL KB, KB ECO, KB PRO, KT, KBF, KBF PRO, KBF-S ECO, KMF

|                | Modell<br>53, 65 | Modell<br>115, 130 | Modell<br>170 | Modell<br>240, 260 | Modell<br>400, 470 | Modell<br>720 | Modell<br>1020, 1060 | Modell<br>1600 |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Set 300 (30cm) | .                | .                  | .             | .                  | .                  | .             | .                    | .              |
| Set 500 (50cm) | -                | .                  | .             | .                  | .                  | .             | .                    | .              |
| Set 900 (90cm) | -                | -                  | -             | -                  | .                  | .             | .                    | .              |

### TECHNISCHE DATEN LICHTLEISTEN

|                                         |                         |         |         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Länge:                                  | 30 cm                   | 50 cm   | 90 cm   |
| Beleuchtungsstärke<br>(Abstand: 12 cm): | 540 Lux                 | 670 Lux | 690 Lux |
| Lichtfarbe:                             | 6.500 K (cool daylight) |         |         |
| Betriebs-<br>Temperaturbereich          | -10...60 °C             |         |         |
| Schutzart                               | IP 65                   |         |         |

### TECHNISCHE DATEN STEUERGERÄT

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Netzspannung   | 100-240 V                                 |
| Dimmer:        | 0-100 %                                   |
| Zeitschaltuhr: | Digital, für Tages- und<br>Wochenprogramm |
| Befestigung:   | Magnetisch am Schrank                     |