

Modelo VDL 56 | Cámaras de secado al vacío para disolventes inflamables


Las cámaras de secado al vacío de seguridad BINDER de la serie VDL garantizan la mayor seguridad en el secado de disolventes orgánicos,. Equipos con protección contra explosiones, con clasificación según la Directiva ATEX 2014/34/UE: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/ Gc/- X.

VENTAJAS

- Secado cuidadoso y rápido
- Transmisión óptima del calor mediante placas conductoras de calor de gran tamaño
- Trabajo seguro gracias a un concepto de seguridad conforme a ATEX
- Disponible opcionalmente como sistema modular completo con bomba de vacío y armario de bombas



Modelo 56

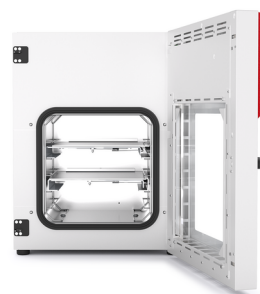

Modelo 56

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: temperatura ambiente más entre +9 °C y +110 °C
- Equipos conforme a ATEX: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Controlador con pantalla táctil intuitiva e indicadores gráficos para la presión y la temperatura
- Supervisión del secado controlada por programa con ventilación automática al finalizar el proceso
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Controlador de presión para autorización de calentamiento a partir de < 100 mbar
- 2 bandejas con bloqueo de aluminio, con posicionamiento personalizable
- Conexión universal para ventilación con aire ambiental o gas inerte
- Puerto de acceso universal con brida pequeña DN 16 y brida ciega, para la colocación de sensores o cables en la cámara
- Cristal de seguridad con protección contra astillado y suspendido con resortes
- Gran ventana de visión
- Interfaz de ordenador: Ethernet

OPTIONAL EQUIPMENT

- Bandejas: selección de bandejas de aluminio o acero inoxidable en función de los requisitos de la prueba
- Salida analógica para señales de presión y temperatura: para la monitorización y evaluación externas de los parámetros del proceso, posibilidad de vinculación con los sistemas propios
- Ventilación universal: selección de diversos sistemas de ventilación con aire ambiental o gas inerte
- Puerto de acceso DN 40: para la incorporación de dispositivos de medición externos
- Multi Management Software APT-COM: administración, registro y documentación de parámetros de dispositivos
- Servicios: amplios servicios que garantizan el correcto funcionamiento de los dispositivos

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Volumen interior [L]	NetzanschlussGeraetesicherung (Nennspannung, Gerätesicherung)	Enchufe de red	Modelo	Denominación en catálogo	Número de artículo
Modelo VDL 56					
55	100...120 V 1~ 50/60 Hz -16,0 A	NEMA 5-15	Estándar	VDL056-120V	9630-0014

Volumen interior [L]	NetzanschlussGeraetesicherung (Nennspannung, Gerätesicherung)	Enchufe de red	Modelo	Denominación en catálogo	Número de artículo
	200...230 V 1~ 50/60 Hz -8,0 A	CEE 7/7	Estándar	VDL056-230V	9630-0010


DATOS TÉCNICOS

Datos generales		
Número de artículo	9630-0010	9630-0014
Denominación en catálogo	VDL056-230V	VDL056-120V
Modelo	Estándar	Estándar
Datos técnicos temperatura		
Rango de temperatura	+9 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 110 °C	+9 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 110 °C
Desviación de temperatura a 100 °C	1,2 ± K	1,2 ± K
Fluctuación de la temperatura a 100 °C	0,1 ± K	0,1 ± K
Tiempo de calentamiento a 100 °C	140 min	140 min
Datos de vacío		
Índice de fuga	0,01 bar/h	0,01 bar/h
Fluctuación de la presión a 50 mbar	1 ± mbar	1 ± mbar
Fluctuación de la presión a 400 mbar	70 ± mbar	70 ± mbar
Datos eléctricos		
Tensión nominal	200...230 V	100...120 V
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia nominal	1,4 kW	1,4 kW
Fusible del equipo	8,0 A	16,0 A
Fase (tensión nominal)	1~	1~
Conexiones		
Conexión de vacío con brida pequeña	16 DN mm	16 DN mm
Conducto de medición con brida pequeña	16 DN mm	16 DN mm
Dimensiones y pesos		
Volumen interior	55 L	55 L
Peso neto del equipo (vacío)	104 kg	104 kg
Carga máxima por bandeja	20 kg	20 kg
Carga total máxima	60 kg	60 kg
Distancia a la pared trasera	100 mm	100 mm
Distancia a la pared lateral	70 mm	70 mm
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones		

Anchura neto	638 mm	638 mm
Altura neto	815 mm	815 mm
Fondo neto	461 mm	461 mm
Dimensiones interiores		
Anchura del interior	400 mm	400 mm
Altura del interior	400 mm	400 mm
Fondo del interior	343 mm	343 mm
Puertas exteriores	1	1
Datos de relevancia medioambiental		
Nivel de presión acústica	40 dB(A)	40 dB(A)
Consumo energético a 100 °C	180 Wh/h	180 Wh/h
Estructuras		
Cantidad de bandejas (est./máx.)	2/5	2/5

Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del ±10%. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y de conformidad con la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias recomendadas a la pared del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

DIMENSIONES incl. componentes y conexiones [mm]

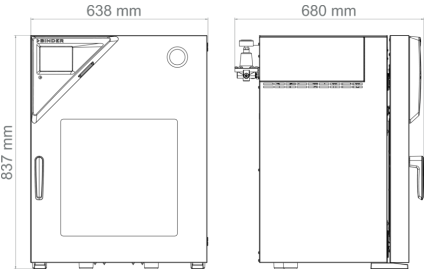

OPCIONES

Denominación en catálogo	Descripción	VDL 56	*	Número de artículo
Ampliación del certificado de calibración	para temperatura, para ampliar la medición en el centro del espacio útil a otra temperatura de comprobación	•	-	8012-1127
Bandejas con bloqueo	Bandejas con bloqueo de acero inoxidable en lugar de las bandeja con bloqueo estándar de aluminio, incluida calibración	•	-	8612-0012
Cerradura	Manilla de puerta con llave	•	-	8612-0002
Certificado de calibración de presión	Ampliación de la calibración del indicador de presión con un valor de presión adicional, incluyendo certificado	•	-	8012-2022
	Calibración del indicador de presión a un valor predefinido, incluyendo certificado	•	-	8012-2021

Denominación en catálogo	Descripción	VDL 56	*	Número de artículo
Certificado de calibración de temperatura	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-0916
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 15-18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-0919
	para medición en el centro del espacio útil de la cámara con la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-1145
Junta de puerta	de FKM, sin silicona	•	-	8612-0008
Medición de temperatura de la muestra	con sensor flexible PT 100 e indicador digital de la temperatura de la muestra	•	-	8612-0006
Puerto de acceso universal	Puerto de acceso universal adicional brida pequeña DN 40 con brida ciega, para la colocación de sensores o cables en la cámara.	•	-	8612-0003
Salida analógica 4-20 mA	para valores de temperatura (salida no ajustable)	•	-	8612-0004
Ventilación universal adicional	Conexión universal adicional para ventilación con aire ambiental o gas inerte. Limitador volumétrico (G") y conexión con rosca exterior de 3/8".	•	-	8612-0001
Válvulas con junta de FFKM para VDL	Mayor resistencia a los aldehídos, aminas, ésteres, cetonas y disolventes polares y apolares	•	-	8012-2841

ACCESORIOS

Denominación en catálogo	Descripción	VDL 56	*	Número de artículo
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	para la realización de grabaciones y documentación con hasta 5 equipos conectados en red.			
	Versión 4, edición BASIC	•	-	9053-0039
APT-COM™ 4 GLP-Edition	para trabajar en condiciones conformes con las BPL. La documentación de los valores de medición se realiza de acuerdo con los requisitos de las directivas de la FDA 21CFR11, mediante una manipulación segura.			
	Versión 4, edición BLP	•	-	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	administración sencilla de equipos y usuarios basados en la edición BASIC. Apto para la interconexión en red de hasta 100 equipos.			
	Versión 4, edición PROFESSIONAL	•	-	9053-0040
Armario para bombas VDL 56 con bomba de vacío VP5 EX	Armario para bombas para alojar bombas de vacío. Incluye bomba de membrana química ATEX con capacidad de aspiración nominal de 1,9 m³/h, presión final de 12 mbar, 230 V/ 50 Hz. Conformidad con ATEX: cámara de bombeado (gases bombeados): II 2G Ex h IIC T3 Gb X; cámara exterior con inyección de gas inerte: II 2G Ex h IIB T4 Gb X; cámara exterior sin inyección de gas inerte: II 3G Ex h IIB T4 Gc X; motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb			
	Modelo 230 V / 50-60 Hz	•	-	8012-2629
Bandejas con bloqueo	Acero inoxidable	•	-	8012-2258

Denominación en catálogo	Descripción	VDL 56	*	Número de artículo
	Aluminio	•	-	8012-2056
Bomba de vacío VP5 EX	Bomba de membrana química ATEX con capacidad de aspiración nominal de 1,9 m³/h, presión final de 12 mbar, 230 V/50 Hz. Conformidad con ATEX: máxima presión permitida en la entrada y cámara de bombeado 1,1 (gases bombeados): II 2G Ex h IIC T3 Gb X; cámara exterior con inyección de gas inerte: II 2G Ex h IIB T4 Gb X; cámara exterior sin inyección de gas inerte: II 3G Ex h IIB T4 Gc X; motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb	•	-	5013-0258
Dispositivo de comprobación del manómetro VDL	para la comprobación anual de la función del manómetro del lavado con aire comprimido	•	-	9501-0048
Documentación de calificación	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, compuesta por: listas de comprobación IQ/OQ incl. instrucciones de calibración y documentación detallada de los equipos; parámetros: temperatura, CO ₂ , O ₂ , presión, en función del equipo			
	Digital en formato PDF	•	-	7057-0001
	Impresos en la carpeta	•	-	7007-0001
	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, según los requisitos del cliente, ampliación de la carpeta de carpeta de calificación IQ/OQ con el capítulo PQ; parámetros: temperatura, CO ₂ , O ₂ , o presión, en función del equipo			
	Digital en formato PDF	•	-	7057-0005
	Impresos en la carpeta	•	-	7007-0005
Kit de conexión VDL VP5 PTFE	para bomba de vacío VP5 EX. Compuesto por manguera antiestática de PTFE de 1,9 m de longitud, con brida pequeña DN 16 a ambos lados, 2 anillos tensores y 2 anillos de centrado universal.	•	-	8012-2614
Kit de conexión VDL VP5 Acero inoxidable	para bomba de vacío VP5 EX. Compuesto por manguera de acero inoxidable de 1,9 m de longitud, con brida pequeña DN 16 a ambos lados, 2 anillos tensores y 2 anillos de centrado universal.	•	-	8012-2724
Limpiador neutro	intenso, para la eliminación delicada de restos de suciedad; volumen de llenado: 1 kg	•	-	8012-2250

SERVICIOS

Denominación en catálogo	Descripción	*	Número de artículo
Contratos de servicio de mantenimiento			
Contrato de servicio de mantenimiento BRONCE, 3 años	Servicios de mantenimiento según el contrato, comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación del comportamiento de regulación, 20 % de descuento sobre piezas de repuesto	05	DL20-0710
Contrato de servicio de mantenimiento ORO, 3 años	Servicios de mantenimiento según el contrato, comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación del comportamiento de regulación, 20 % de descuento sobre piezas de repuesto, comprobación de todas las funciones esenciales, cambio de piezas de desgaste, calibración de una temperatura de comprobación especificada por el usuario en el centro del espacio útil, incluye certificado	05	DL20-0960
Contrato de servicio de mantenimiento PLATA, 3 años	Servicios de mantenimiento según el contrato, comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación del comportamiento de	05	DL20-0860

Denominación en catálogo	Descripción	*	Número de artículo
	regulación, 20 % de descuento sobre piezas de repuesto, comprobación de todas las funciones esenciales, calibración de una temperatura de comprobación especificada por el usuario en el centro del espacio útil, sin certificado		
Servicios de calibración			
Calibración de presión	Ampliación - Calibración del indicador digital de presión con una presión de comprobación predeterminada en un rango de 20-900 mbar, incluido certificado	05	DL30-0411
	Calibración del indicador digital de presión con una presión de comprobación predeterminada en un rango de 20-900 mbar, incluido certificado	05	DL30-0410
Certificado de calibración de temperatura	Ampliación de la calibración de una (1) temperatura de prueba adicional especificada por el usuario en el centro del espacio útil, incluyendo certificado	05	DL30-0102
	Calibración de una (1) temperatura de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio útil, incluyendo certificado	05	DL30-0170
Medición de temperatura ambiental, 9 puntos de medición	Medición de temperatura ambiental con 9 puntos de medición, con un valor de consigna especificado por el usuario, incluyendo certificado	05	DL30-0109
Medición de temperatura ambiental, 15 puntos de medición	Medición de temperatura ambiental con 15 puntos de medición, con un valor de consigna especificado por el usuario, incluyendo certificado	05	DL30-0218
Servicios de garantía			
Ampliación de la garantía de 1 año	La garantía se amplía 1 año a partir de la fecha de entrega, las piezas de desgaste están excluidas	05	DL50-0020
Servicios de instalación			
Instrucción sobre el equipo	Instrucción en cuanto al principio de funcionamiento y las funciones básicas del equipo, manejo del sistema electrónico de regulación incluyendo la programación	05	DL10-0560
Puesta en marcha del equipo	Conexión del equipo a las conexiones existentes en el lugar de instalación del cliente (corriente, agua, desagüe, gas), comprobación de las funciones básicas, breve instrucción sobre el manejo. (excl.: desembalaje, colocación, instrucción sobre reguladores, programación, trabajos de instalación)	05	DL10-0180
Servicios de mantenimiento			
Comprobación de seguridad	Comprobación de los sistemas de seguridad específicos ATEX: inyección de gas inerte y desconexión de temperatura de seguridad. La comprobación de los sistemas mencionados también forma parte del servicio integral de mantenimiento (DL20-0520)	05	DL34-0000
Mantenimiento	Servicio de mantenimiento único según plan de mantenimiento. Comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación de todas las funciones esenciales. Calibración de una temperatura de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio útil sin certificado	05	DL20-0612
Mantenimiento bomba de vacío VAP 5	Servicio de mantenimiento de la bomba de vacío según plan de mantenimiento, inspección visual, cambio de membranas, juntas y juntas tóricas, (kit de servicios incluido en las prestaciones), así como prueba de funcionamiento final	05	DL20-0430
Servicios de validación			
Aplicación de la IQ/OQ	Aplicación de la IQ/OQ según la carpeta de calificación	05	DL42-0310
Aplicación de la IQ/OQ/PQ	Aplicación de la IQ/OQ/PQ según la carpeta de calificación	05	DL44-0500

INDICACIONES

- 05 Los precios indicados no incluyen los gastos de desplazamiento. Puede consultar los gastos de desplazamiento para su campo de aplicación en el capítulo Servicio BINDER.
- Para aplicaciones en Suiza, a todos los precios de servicios indicados es preciso añadirles un recargo local (a petición).

BINDER GmbH

Tuttlingen, (Alemania)
TEL +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, Nueva York (EE. UU.)
TEL +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

**BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**

Shanghái, R.P. China
TEL +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com