

# Kit di barre luci LED



## Per modelli delle serie KB, KT e KBF

I kit di barre luci si prestano per l'illuminazione a bassa intensità di luce del vano interno di camere climatiche BINDER di differenti serie e dimensioni. Sono facili da installare, fornendo un posizionamento flessibile. I pregiati moduli LED a luce bianca dispongono di protezione da spruzzi d'acqua e sono fissati in robuste guide profilate in alluminio.

Le barre luci sono disponibili in tre diverse lunghezze come kit base con materiale di fissaggio e dispositivo di comando. Grazie al kit ampliamento possono essere collegate al dispositivo di comando due ulteriori barre luci. Il dispositivo di comando contiene un regolatore luminoso per l'impostazione della luminosità e un timer digitale per la regolazione dei tempi di attivazione e disattivazione.

### KIT BASE DI BARRE LUCI LED:

- Kit base 300 Cod. art. 8012-1107
- Kit base 500 Cod. art. 8012-1108
- Kit base 900 Cod. art. 8012-1109

#### Volume di fornitura:

- 2 barre luci LED
- Materiale di installazione:
  - 4 clip di fissaggio in acciaio per molle
  - 6 clip di fissaggio in materiale sintetico
  - Tesa Powerstrips®
- Dispositivo di comando per fino a 4 barre luci LED



Volume di fornitura kit base

### KIT AMPLIAMENTO DI BARRE LUCI LED:

- Kit ampliamento 300 Cod. art. 8012-1716
- Kit ampliamento 500 Cod. art. 8012-1717
- Kit ampliamento 900 Cod. art. 8012-1718

#### Volume di fornitura:

- 2 barre luci LED
- Materiale di installazione:
  - 4 clip di fissaggio in acciaio per molle
  - 6 clip di fissaggio in materiale sintetico



Volume di fornitura kit ampliamento


## ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Barra luci di 50cm, fissata con Tesa Powerstrips® alla parete superiore della camera



Barra luci di 50cm, fissata con clip in materiale sintetico alla griglia inseribile

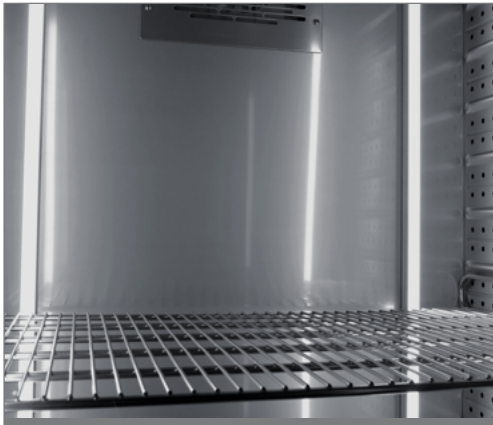

Barra luci di 90cm, fissata con Tesa Powerstrips alla parete posteriore della camera



Barra luci di 30cm, fissata con Tesa Powerstrips alla parete laterale della camera

## IDONEE PER LE SERIE KB, KT E KBF DELLE SEGUENTI GRANDEZZE

	Modello 53	Modello 115	Modello 170	Modello 240	Modello 400	Modello 720	Modello 1020
Kit 300 (30cm)	•	•	•	•	•	•	•
Kit 500 (50cm)	-	•	•	•	•	•	•
Kit 900 (90cm)	-	-	-	-	•	•	•

### DATI TECNICI BARRE LUCI

Lunghezza:	30 cm	50 cm	90 cm
Intensità di illuminazione (distanza: 12 cm):	540 Lux	670 Lux	690 Lux
Colore della luce:	6.500 K (cool daylight)		
Intervallo di temperatura di esercizio	-10...60 °C		
Grado di protezione	IP 65		

### DATI TECNICI DISPOSITIVO DI COMANDO

Tensione di rete	100-240 V
Regolatore luminoso:	0-100 %
Timer:	Digitale, per programma giornaliero e settimanale
Fissaggio:	Magnetico alla camera