

LED-lichtlijnenets



Voor modellen uit de series KB, KT en KBF

De LED-lichtlijnenets zijn geschikt voor de verlichting van de binnenkamer van BINDER-klimaatkasten uit verschillende series en van verschillende afmetingen met lage lichtsterktes. Ze zijn eenvoudig te monteren en flexibel positioneerbaar. De hoogwaardige LED-modules met wit licht zijn waterdicht en ingegoten in robuuste profielrails van aluminium. De lichtlijnen zijn in drie verschillende lengtes als basissets met bevestigingsmateriaal en controller verkrijgbaar. Met een uitbreidingsset kunnen nog twee lichtlijnen worden aangesloten op de controller die met die dimmers voor het instellen van de verlichtingssterkte en een digitale tijdschakelklok voor het regelen van de in- en uit schakeltijden is uitgerust.

BASISSET LED-LICHTLIJNEN:

- Basisset 300 Artikelnr. 8012-1107
- Basisset 500 Artikelnr. 8012-1108
- Basisset 900 Artikelnr. 8012-1109

Omvang levering:

- 2 LED-lichtlijnen
- Inbouwmateriaal:
 - 4 bevestigingsclips van verenstaal
 - 6 bevestigingsclips van kunststof
 - tesa Powerstrips®
- Controller voor 4 LED-lichtlijnen



Omvang levering basisset

UITBREIDINGSSET LED-LICHTLIJNEN:

- Uitbreidingsset 300 Artikelnr. 8012-1716
- Uitbreidingsset 500 Artikelnr. 8012-1717
- Uitbreidingsset 900 Artikelnr. 8012-1718

Omvang levering:

- 2 LED-lichtlijnen
- Inbouwmateriaal:
 - 4 bevestigingsclips van verenstaal
 - 6 bevestigingsclips van kunststof



Omvang levering uitbreidingsset


INBOUWVOORBEELDEN



50cm lichtlijn, bevestigd met tesa Powerstips® aan ketelplafond



50cm lichtlijn, bevestigd met kunststofclips aan legrooster

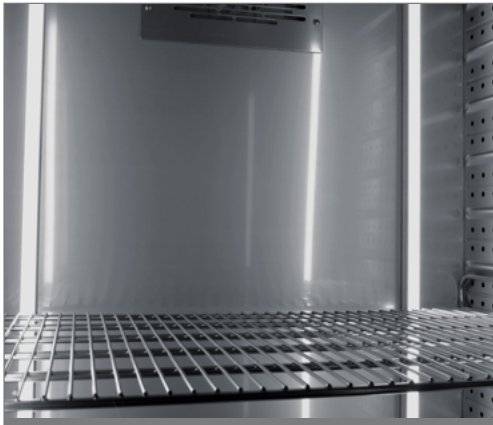

90 cm lichtlijn, bevestigd met tesa Powerstips® aan achterwand ketel



30 cm lichtlijn, bevestigd met tesa Powerstips® aan zijwand van ketel

BESCHIKT VOOR DE MATEN KB, KT EN KBF

	Model 53	Model 115	Model 170	Model 240	Model 400	Model 720	Model 1020
Set 300 (30cm)	•	•	•	•	•	•	•
Set 500 (50cm)	-	•	•	•	•	•	•
Set 900 (90cm)	-	-	-	-	•	•	•

TECHNISCHE GEGEVENS LICHTLIJNEN

Lengthe:	30 cm	50 cm	90 cm
Verlichtingssterkte (afstand: 12 cm):	540 lux	670 lux	690 lux
Lichtkleur:	6.500 K (cool daylight)		
Operationeel temperatuurbereik	-10...60 °C		
Beschermingsgraad	IP 65		

TECHNISCHE GEGEVENS CONTROLLER

Netspanning	100-240 V
Dimmer:	0-100%
Tijdschakelklok:	Digitaal, voor dag- en weekprogramma
Bevestiging:	Magnetisch aan kast